

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

**Методика выполнения измерений массовой доли  
свинца и кадмия в пищевых продуктах и  
продовольственном сырье методом  
электротермической атомно-абсорбционной  
спектрометрии**

Методические указания  
МУК 4.1.986—00

Издание официальное

Минздрав России  
Москва•2000

#### 4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

### **Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии**

**Методические указания  
МУК 4.1.986—00**

**ББК 51.23**

**М54**

**М54 Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии: Методические указания—М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000.—32 с.**

**ISBN 5—7508—0246—9**

1. Разработаны Федеральным центром госсанэпиднадзора Минздрава России (Брагина И. В., Ермаченко Л. А., Ерохина С. И.) и ООО «КОРТЭК» (Садагов Ю. М., Егорова И. А.).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по госсанэпиднормированию при Минздраве России.

3. Утверждены и введены в действие Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации.

4. Введены впервые.

**ББК 51.23**

Редакторы Барабанова Т. Л., Аكوпова Н. Е.  
Технический редактор Юшкова Т. Г.

Подписано в печать 18.12.00

Формат 60x88/16

Печ. л. 2,0  
Заказ 100

Тираж 3000 экз.

ЛР № 021232 от 23.06.97

Министерство здравоохранения Российской Федерации  
101431, Москва, Рахмановский пер., д. 3

Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован  
Издательским отделом

Федерального центра госсанэпиднадзора Минздрава России  
125167, Москва, проезд Аэропорта, 11.  
Отделение реализации, тел. 198-61-01

**ISBN 5—7508—0246—9**

**© Федеральный центр госсанэпиднадзора  
Минздрава России, 2000**

**Содержание**

1. Назначение и область применения .....	4
2. Метрологические характеристики методики .....	4
3. Метод измерений .....	5
4. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы .....	6
5. Требования безопасности .....	8
6. Требования к квалификации персонала .....	8
7. Условия выполнения измерений .....	8
8. Подготовка к выполнению измерений .....	9
9. Выполнение измерений .....	13
10. Вычисление результата анализа .....	27
11. Форма представления результата анализа .....	28
12. Контроль погрешности измерений .....	28
13. Список литературы .....	32

**МУК 4.1.986—00**

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный государственный санитарный  
врач Российской Федерации

Г. Г. Онищенко

13 октября 2000 г.

Дата введения: 1 января 2001 г.

#### **4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

### **Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии**

**Методические указания**

**МУК 4.1.986—00**

---

#### **1. Назначение и область применения**

Настоящие методические указания устанавливают метод атомно-абсорбционной спектроскопии с атомизацией в графитовой печи для определения содержания свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье и предназначены для проведения лабораторных исследований безопасности пищевой продукции учреждениями госсанэпидслужбы России, а также для предприятий и учреждений, осуществляющих контроль качества и исследование пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с СанПиН 2.3.2.560—96 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» и аккредитованных в установленном порядке.

#### **2. Метрологические характеристики методики**

Приведенные в настоящих методических указаниях оптимальные аппаратные параметры и условия проведения измерений относятся к атомно-абсорбционному спектрометру с электротермическим атомизатором «Квант-З.ЭТА». При использовании спектрометров других марок эти параметры должны быть согласованы с требованиями Руководства по эксплуатации фирмы-изготовителя.

---

Издание официальное

Настоящие методические указания не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без разрешения Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России.

Диапазон определения массовых долей элементов в пищевых продуктах приведен в табл. 2.1.

Таблица 2.1

**Диапазон определения массовых долей элементов**

Определяемый элемент	Диапазон определения массовой доли элемента в продукте, мг/кг
Кадмий	0,01—2,0
Свинец	0,02—10,0

Диапазон определяемых массовых концентраций элементов в растворах для анализа, полученных в результате минерализации образцов пищевых продуктов и пищевого сырья и последующего разбавления минерализата, приведен в табл. 2.2.

Таблица 2.2

**Диапазон определяемых массовых концентраций элементов  
в растворах для анализа**

Определяемый элемент	Диапазон массовых концентраций элемента в растворе, мкг/дм <sup>3</sup>
Кадмий	0,1—2,0
Свинец	2,0—40,0

Настоящая методика с вероятностью  $P = 0,95$  обеспечивает получение результатов анализа с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в табл. 2.3.

Таблица 2.3

**Характеристики погрешности измерений**

Определяемый элемент	Диапазон содержаний, мг/кг	Сходимость $d_{0,95}$ , %	Воспроизводимость $D_{0,95}$ , %	Границы относительной погрешности $\delta$ , %
Кадмий	0,01—2,0	22	36	$\pm 30$
Свинец	0,02—1,0	28	42	$\pm 35$

### 3. Метод измерений

Метод основан на измерении оптической плотности атомного пара определяемого элемента, образующегося в результате электротермической атомизации минерализата пищевого продукта в графитовой печи атомно-абсорбционного спектрометра, на резонансной спектральной линии.

**4. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
материалы и реактивы**

*4.1. Средства измерений*

4.1.1. Атомно-абсорбционный (АА) спектрометр с электротермическим атомизатором «Квант-З.ЭТА», с корректором неселективного (фонового) поглощения на основе эффекта Зеемана, или другой, с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками, укомплектованный лампами полого катода (ЛПК) на кадмий и свинец

ТУ 4434—009—  
2990357—95

4.1.2. Весы лабораторные общего назначения, 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г

ГОСТ 24104  
ГОСТ 7328

4.1.3. Набор гирь Г-2—200

4.1.4. Государственные стандартные образцы (ГСО) состава растворов ионов кадмия и свинца с массовой концентрацией элементов в 1,0 мг/см<sup>3</sup> и относительной погрешностью концентрации не более 1 %

4.1.5. Пипетки мерные 2—1—2—1 или 1—1—2—1, 2—1—2—2 или 1—1—2—2, 1—2—2—5 и 1—2—2—10

ГОСТ 29927

4.1.6. Одноканальные пипетки переменного объема 0,5—10 мкл и 200—1000 мкл с погрешностью дозирования не более 2 % или аналогичные пипетки с погрешностью дозирования не более 2 %

ГОСТ Р 50444

4.1.7. Колбы мерные 2—25—2, 2—50—2, 2—100—2, 2—200—2 и 2—1000—2

ГОСТ 1770

4.1.8. Цилиндры 1—5, 1—10, 1—25, 1—50 и 1—500

ГОСТ 1770

Допускается использование других средств измерений с метрологическими характеристиками не хуже указанных выше.

*4.2. Вспомогательные устройства и материалы*

4.2.1. Электродуховка сопротивления камерная лабораторная, обеспечивающая поддержание заданного температурного режима в диапазоне от 150 до 500 °С с погрешностью не более ± 20 °С

4.2.3. Автоклавы аналитические НПВФ «Анкон-АТ-2» с реакционной камерой, вместимостью 150 см<sup>3</sup>

ТУ 48—0572—31—  
259

4.2.4. Насос водоструйный или насос Камовского	ГОСТ 25336
4.2.5. Щипцы тигельные	
4.2.6. Электроплитка бытовая или горелка газовая	ГОСТ 14919
4.2.7. Баня водяная	
4.2.8. Чашки или тигли кварцевые №№ 2—4 или чашки (тигли) фарфоровые	ГОСТ 19903 ГОСТ 9147
4.2.9. Стекла часовые или чашки Петри для накрывания тиглей (чашек)	
4.2.10. Воронки лабораторные	ГОСТ 25336
4.2.11. Фильтры обеззоленные с синей лентой, диаметром 7—10 см	ТУ 6—09—1678
4.2.12. Стаканы В-1—50, В-1—100 или В-1—150	ГОСТ 25336
4.2.13. Колбы Кьельдаля 2—50—29, 2—100—29, 2—25—29 или колбы плоскодонные П-2—250—34 ТХС	ГОСТ 25336
4.2.14. Стаканчики для взвешивания СВ-14/8	ГОСТ 25336
4.2.15. Колбы Кн-2—1000—29 или Кн-2—1000—34	ГОСТ 25336
4.2.16. Колбы конические, вместимостью 100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 25336
4.2.17. Колбы Кн-1—250—29/32 ТСХ или П-1—250—29/32 ТС	ГОСТ 25336
4.2.18. Холодильник XIII-1—200—29/32 ТС	ГОСТ 25336
4.2.19. Воронка делительная ВД-2—250—29/32 ХС	ГОСТ 25336
4.2.20. Пробирки для микропроб типа «Эппендорф», вместимостью 1,5—2,0 см <sup>3</sup>	
4.2.21. Шарики стеклянные, используемые для обеспечения равномерности кипения	
4.2.22. Синтетическое моющее средство (СМС) для мытья лабораторной посуды (2 г СМС растворить в 1000 см <sup>3</sup> воды)	

#### 4.3. Реактивы

4.3.1. Кислота азотная особой чистоты или очищенная методом перегонки	ГОСТ 11125 ГОСТ 4461
4.3.2. Кислота соляная, особой чистоты	ГОСТ 14261
4.3.3. Кислота серная	ГОСТ 4204
4.3.4. Палладий металлический, порошок (99,94 %)	ГОСТ 14836
4.3.5. Вода дистиллированная	ГОСТ 6709
4.3.6. Вода бидистиллированная или деионизованная	
4.3.7. Водорода пероксид (пергидроль), х. ч.	ГОСТ 10929
4.3.8. Аргон газообразный высокой чистоты	ГОСТ 10157

Допускается применение других реактивов с техническими и метрологическими характеристиками не хуже указанных.



## 5. Требования безопасности

5.1. При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТу 12.1.007.

5.2. Помещение, в котором проводят измерения, должно быть оборудовано общей приточно-вытяжной вентиляцией.

5.3. Над модулем атомизатора спектрометра должен быть установлен вытяжной зонт согласно техническому описанию и инструкции по эксплуатации ГКНЖ.15.00.000 ТО п. 8.5.

5.4. Не допускается эксплуатация спектрометра без заземления, а также использование для заземления нулевой фазы электропитания.

5.5. Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТу 12.2.007.

5.6. Организация обучения работающих безопасности труда по ГОСТу 12.0.004.

5.7. Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТу 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТу 12.4.009.

5.8. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных ГН 2.2.5.686—98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

5.9. При эксплуатации сжатых газов следует соблюдать «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ 10—115—96), Госгортехнадзор России, ГОСТ 12.2.085.

## 6. Требования к квалификации персонала

6.1. К работе на атомно-абсорбционном спектрометре допускается персонал, прошедший соответствующий курс подготовки.

6.2. К работе по подготовке проб пищевых продуктов допускается персонал, имеющий навыки работы в химической лаборатории и прошедший обучение работе с аналитическими автоклавами (при проведении автоклавной пробоподготовки).

## 7. Условия выполнения измерений

При выполнении измерений необходимо соблюдать следующие условия.

Температура окружающего воздуха, °С	(20 ± 10)
Атмосферное давление, кПа	(101 ± 4)
	(760 ± 30) мм рт. ст.
Относительная влажность воздуха, %	(65 ± 15)
Напряжение питания сети, В	220 (205—230)
Частота питающей сети, Гц	(50 ± 0,5)

## 8. Подготовка к выполнению измерений

### 8.1. Настройка спектрометра

Включают и настраивают спектрометр согласно техническому описанию и инструкции по эксплуатации. Основные инструментальные параметры определения свинца и кадмия на спектрометре «Квант-З.ЭТА» приведены в табл. 8.1.

Таблица 8.1

Оптимальные аппаратные параметры спектрометра «КВАНТ-З.ЭТА»

Определяемый элемент	Источник излучения	Длина волны, нм	Ток ЛПК, мА	Ширина щели монохроматора, мм
Кадмий	ЛПК	228,8	5	0,5
Свинец	ЛПК	283,3	10	0,25

Параметры программ нагрева графитовой печи прибора «Квант-З.ЭТА» приведены в табл. 8.2.

Таблица 8.2

Программы нагрева графитовой печи

Стадия	Время, с		Температура, °С		Поток аргона
	нарастание	выдержка	кадмий	свинец	
Испарение	9	9	50*		Открыт
Пиролиз 1	9	5	60*		Открыт
Пиролиз 2	9	15**	500	800	Открыт
Пиролиз 3	0	1	500	800	Закрыт
Атомизация	0	0.6	1800	2000	Закрыт
Очистка	0	2	2600		Открыт

\* Температура стадии «испарение» может изменяться на  $\pm 10$  °С для разных экземпляров спектрометра.

\*\* Время выдержки стадии «пиролиз 2» может быть увеличено на 5—10 с, если амплитудные значения фоновой абсорбционности превышают 1,2 Б.

## 8.2. Приготовление растворов

Для приготовления растворов используют бидистиллированную или деионизованную воду.

8.2.1. *Фоновый раствор азотной кислоты с концентрацией 0,03 моль/дм<sup>3</sup>*. В мерную колбу, вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, помещают 2 см<sup>3</sup> азотной кислоты (п. 4.3.1) и доводят до метки бидистиллированной водой. Полученный раствор используют для разбавления проб и приготовления градуировочных растворов.

8.2.2. *Раствор палладия с массовой концентрацией 10 мг/см<sup>3</sup>*. Навеску 1,00 г металлического палладия помещают в термостойкий стакан, вместимостью 100 см<sup>3</sup>, добавляют 5 см<sup>3</sup> концентрированной азотной кислоты и нагревают на электроплитке с закрытой спиралью до полного растворения металла. Раствор охлаждают, фильтруют в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доводят объем до метки фоновым раствором азотной кислоты (п. 8.2.1) и перемешивают. Концентрация палладия в приготовленном растворе равна 10 мг/см<sup>3</sup>. Допускается использовать коммерческий палладиевый модификатор для атомно-абсорбционной спектрометрии с концентрацией палладия 10 г/дм<sup>3</sup> производства фирмы Метск.

8.2.3. *Фоновый раствор палладия с массовой концентрацией 20 мг/дм<sup>3</sup>*. В мерную колбу, вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, помещают 2 см<sup>3</sup> раствора палладия (п. 8.2.2), доводят до метки фоновым раствором азотной кислоты (п. 8.2.1) и перемешивают.

8.2.4. *Исходный раствор (А) с массовой концентрацией кадмия, свинца 10 мг/дм<sup>3</sup>*. Вскрывают ампулу ГСО соответствующего элемента (п. 4.1.4) с концентрацией 1 мг/см<sup>3</sup>, выливают в сухой стакан, с помощью пипетки, вместимостью 1 см<sup>3</sup>, отбирают 1 см<sup>3</sup> раствора ГСО, переносят в мерную колбу, вместимостью 100 см<sup>3</sup>, и доводят до метки фоновым раствором азотной кислоты (п. 8.2.1). В отсутствие ГСО допускается использование стандартных растворов элементов, приготовленных согласно ГОСТу 4212. Срок хранения раствора — 6 месяцев.

8.2.5. *Раствор (Б) с массовой концентрацией кадмия, свинца 200 мкг/дм<sup>3</sup>*. Отбирают пипеткой 2 см<sup>3</sup> раствора А (п. 8.2.4), переносят в мерную колбу, вместимостью 100 см<sup>3</sup>, и доводят до метки фоновым раствором азотной кислоты (п. 8.2.1). Срок хранения раствора 10 дней.

8.2.6. *Раствор (В) с массовой концентрацией кадмия 10 мкг/дм<sup>3</sup>*. Отбирают пипеткой 5 см<sup>3</sup> раствора Б кадмия (п. 8.2.5), переносят в мерную колбу, вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доводят до метки фоновым раствором азотной кислоты (п. 8.2.1). Раствор готовят в день анализа.

### 8.3. Градуировка спектрометра

8.3.1. Градуировку выполняют согласно техническому описанию и инструкции по эксплуатации АА спектрометра.

Число измерений каждого градуировочного раствора – 3. Относительное среднее квадратическое отклонение результатов параллельных измерений каждого градуировочного раствора не должно превышать 10 %.

8.3.2. Градуировочные растворы элементов готовят в день проведения анализа в мерных колбах, вместимостью 25, 50 и 100 см<sup>3</sup>. Растворы в колбах доводят до метки фоновым раствором палладия (п. 8.2.3).

8.3.3. Приготовление растворов для градуировки проводят согласно табл. 8.3.

8.3.4. В качестве «нулевого» раствора при приготовлении градуировочных растворов элементов и при проведении градуировки используют фоновый раствор палладия с массовой концентрацией 20 мг/дм<sup>3</sup> (п. 8.2.3).

Таблица 8.3

Приготовление градуировочных растворов свинца и кадмия

№№ р-ров	Массовая концентрация в градуировочном растворе, мкг/дм <sup>3</sup>		Объем мерной колбы, см <sup>3</sup>	Аликвоты разбавляемых растворов, помещаемых в мерную колбу
	кадмий	свинец		
1	0,1	2	100	По 1 см <sup>3</sup> р-ров В (п. 8.2.6) и Б (п. 8.2.5)
2	0,5	10	100	По 5 см <sup>3</sup> р-ров В (п. 8.2.6) и Б (п. 8.2.5)
3	1,0	20	100	По 10 см <sup>3</sup> р-ров В (п. 8.2.6) и Б (п. 8.2.5)
4	2,0	40	50	По 10 см <sup>3</sup> р-ров В (п. 8.2.6.) и Б (п. 8.2.5.)

Типичные градуировочные графики кадмия и свинца для АА спектрометра «Квант–Z.ЭТА» приведены на рис. 1 и 2, соответственно.

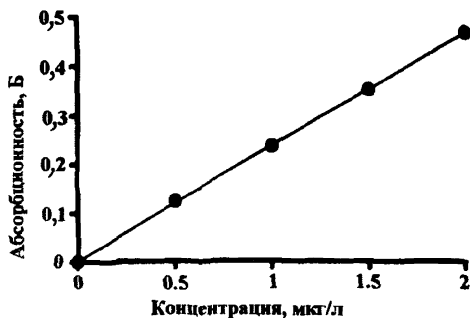


Рис. 1. Градуировочный график для определения кадмия.

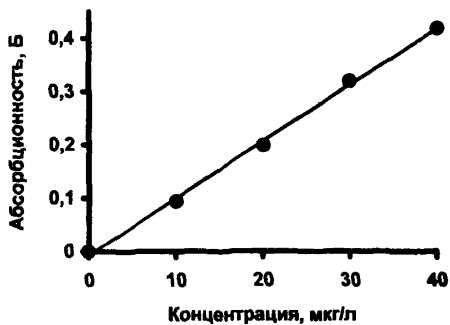


Рис. 2. Градуировочный график для определения свинца.

8.3.5. Стабильность градуировочной характеристики контролируют не реже, чем через каждые 20 анализируемых проб. Образцами для контроля стабильности градуировочных характеристик являются градуировочные растворы №№ 2 или 3, согласно табл. 8.3. Градуиро-

вочную характеристику считают стабильной и используют в дальнейших измерениях, если выполняется следующее условие:

$$\frac{|C - C_0|}{C_0} \cdot 100 \leq 0,5\delta, \text{ где} \quad (1)$$

$C_0$  – действительное значение массовой концентрации элемента в градуировочном растворе, мкг/дм<sup>3</sup>;

$C$  – измеренное значение массовой концентрации элемента в этом же градуировочном растворе, мкг/дм<sup>3</sup>;

$\delta$  – значение относительной погрешности, приведенное в табл. 2.3.

В случае невыполнения условия (1) проводят коррекцию имеющейся градуировки или проводят повторную градуировку.

## 9. Выполнение измерений

### 9.1. Отбор проб

9.1.1. Отбор проб проводят в соответствии с нормативно-технической документацией на конкретный вид анализируемой продукции.

9.1.2. Для каждой пробы выполняют 2 параллельных определения.

### 9.2. Подготовка посуды

Используемую для анализа посуду промывают раствором СМС (п. 4.2.19), водопроводной водой, ополаскивают дистиллированной водой и тщательно промывают раствором азотной кислоты с концентрацией 1 моль/дм<sup>3</sup>. Непосредственно перед использованием посуду ополаскивают фоновым раствором азотной кислоты (п. 8.2.1).

### 9.3. Подготовка проб к анализу (минерализация проб)

#### 9.3.1. Сухая минерализация

Подготовку проб методом сухой минерализации проводят согласно ГОСТу 26929 [1].

9.3.1.1. Способ сухой минерализации применяют для всех видов сырья и продуктов, кроме продуктов с содержанием жира больше 60 %, а также животных и растительных жиров и масел.

9.3.1.2. В фарфоровый или кварцевый тигель (чашку) берут навеску продукта массой 2—5 г из подготовленной к испытаниям пробы. Необходимый объем жидкого продукта отмеряют пипеткой.

9.3.1.3. Продукты, содержащие углекислый газ (пиво, шипучие и игристые вина, минеральные воды, газированные напитки и соки), освобождают от него.

При анализе пива колбу, вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, на треть заполняют пивом (температура продукта должна быть комнатной), закрывают пробкой с отверстием, в которое вставлена трубка, и встряхивают в течение 20—30 мин.

При анализе вина, минеральной воды, газированных соков и напитков в пробе продукта, помещенного в колбе с тубусом, создают вакуум при помощи водоструйного или масляного насоса в течение 2—3 мин до исчезновения пены и появления больших пузырей на поверхности жидкости.

9.3.1.4. При содержании в продукте до 20 % влаги тигель (чашку) с навеской помещают на электроплитку и проводят осторожно обугливание, не допуская сильного дымления. После прекращения выделения дыма тигель (чашку) помещают в электропечь, отрегулированную ранее на температуру около 250 °С.

При содержании влаги в продукте от 20 до 80 % тигель (чашку) с навеской помещают на кипящую водяную баню или в сушильный шкаф (доводя его температуру до 150 °С), или на электрическую плитку и удаляют влагу. Затем осторожно обугливают содержимое тигля (чашки) на газовой горелке или электрической плитке до прекращения выделения дыма, не допуская сильного дымления, воспламенения и выбросов. Тигель (чашку) помещают в электропечь, отрегулированную ранее на температуру около 250 °С, а продукцию, содержащую более 20 % сахаров, помещают в электропечь, отрегулированную ранее на температуру около 150 °С.

При содержании в продукте влаги более 80 % навеску в тигле (чашке) обрабатывают следующим образом:

- винодельческие продукты упаривают досуха на водяной бане и помещают в электропечь;

- пиво, минеральную воду, безалкогольные напитки и плодово-овощные соки и напитки на электроплитке упаривают досуха и проводят обугливание до прекращения выделения дыма, затем помещают в электропечь, отрегулированную на температуру около 150 °С;

- в навеску жидких молочных продуктов (молока, кисломолочных продуктов и молочных консервов) добавляют раствор азотной кислоты из расчета 1 см<sup>3</sup> на 50 г продукта, перемешивают, помещают на электроплитку и осторожно проводят обугливание до прекращения выделения дыма, затем тигель (чашку) помещают в электропечь, отрегулированную ранее на температуру около 250 °С.

9.3.1.5. После окончания обугливания минерализацию проб проводят в электропечи, постепенно повышая температуру до 450 °С:

250 °С – 30 мин;

300 °С – 30 мин;

350 °С – 30 мин;

400 °С – 30 мин;

450 °С – 1—3 ч до получения серой золы.

Допускается минерализация зерна и зернопродуктов при температуре до 500 °С.

9.3.1.6. Тигель с золой вынимают из электропечи, охлаждают до комнатной температуры, золу смачивают раствором азотной кислоты (1 : 1), раствор выпаривают досуха на плитке. После охлаждения тигель с навеской снова помещают в электропечь, нагретую до температуры 250 °С. Постепенно доводят температуру до 400 °С и выдерживают 30 мин. Указанный цикл повторяют несколько раз. Минерализацию считают законченной, когда зола станет белой или слегка окрашенной, без обугленных частиц. При наличии обугленных частиц повторяют обработку раствором азотной кислоты (1 : 1).

9.3.1.7. В тигель (чашку) с золой прибавляют 1 см<sup>3</sup> раствора азотной кислоты (1 : 1) и нагревают на водяной бане до растворения солей. Затем раствор упаривают до влажных солей, добавляют 5 см<sup>3</sup> фонового раствора азотной кислоты (п. 8.2.1), слегка нагревают на водяной бане до полного растворения солей, охлаждают и количественно переносят в мерную колбу на 25 см<sup>3</sup>. Доводят до метки фоновым раствором азотной кислоты.

9.3.1.8. Одновременно с партией проб готовят 2 контрольных («холостых») опыта для контроля чистоты посуды и реактивов, добавляя в тигель все реактивы, но без навески пробы, и точно повторяя все условия (количество реактивов, температуру, время нагрева), в которых выполняется минерализация пробы.

### 9.3.2. Кислотная минерализация

Подготовку проб методом мокрой минерализации (открытый способ) проводят согласно ГОСТу 26929.

9.3.2.1. Способ основан на полном разрушении органических веществ пробы продукта при нагревании с кислотами-окислителями и перекисью водорода и предназначен для всех видов сырья и продуктов, кроме сливочного масла и животных жиров.

9.3.2.2. Отбирают навеску продукта массой 2—5 г из подготовленной для испытания пробы.

9.3.2.2.1. Навеску жидких и пастообразных продуктов взвешивают в стакане, переносят в колбу Кьельдаля или плоскодонную колбу, смывая стенки стакана 10—15 см<sup>3</sup> дистиллированной воды. Допускается брать навеску непосредственно в плоскодонную колбу.

9.3.2.2.2. Навеску твердых и пастообразных продуктов берут на обеззоленный фильтр, заворачивают в него и стеклянной палочкой помещают на дно колбы Кьельдаля или плоскодонной колбы.

9.3.2.2.3. Навеску сухих продуктов помещают в колбу Кьельдаля, добавляют 15 см<sup>3</sup> воды, перемешивают.

9.3.2.2.4. Желатин оставляют на 1 ч для набухания.



9.3.2.3. В колбу с навеской продукта, подготовленной к минерализации, вносят азотную кислоту из расчета 10 см<sup>3</sup> на каждые 5 г продукта, на каждые 1—2,5 г консервированного молока и выдерживают не менее 15 мин. Можно оставить на ночь. Затем в колбу вносят 2—3 стеклянных шарика для равномерного кипения, закрывают грушевидной пробкой и начинают постепенно нагревать на электроплитке, упаривая содержимое колбы до объема 3—5 см<sup>3</sup>.

9.3.2.4. Колбы охлаждают, вносят 10 см<sup>3</sup> азотной кислоты, содержимое упаривают до объема 5 см<sup>3</sup>, охлаждают. Эту процедуру повторяют 2—4 раза.

9.3.2.5. В колбу вносят 10 см<sup>3</sup> азотной кислоты, 5 см<sup>3</sup> серной кислоты, 4 см<sup>3</sup> пероксида водорода из расчета на каждые 5 г продукта. Не допускается изменять последовательность внесения кислот, пероксид водорода всегда добавляется последним. Содержимое колбы упаривают до объема около 5 см<sup>3</sup>, не допуская образования коричневой окраски жидкости. При появлении коричневой окраски нагревание прекращают.

9.3.2.6. Колбу охлаждают до комнатной температуры, добавляют 5 см<sup>3</sup> азотной кислоты и 2 см<sup>3</sup> пероксида водорода и снова нагревают до появления белых паров серного ангидрида. Если при этом раствор не обесцветился, процедуру повторяют. Минерализацию считают законченной, если раствор после охлаждения остается бесцветным или бледно-желтым.

9.3.2.7. Для удаления остатков кислот в охлажденную колбу добавляют 10 см<sup>3</sup> воды и кипятят 10 мин с момента выделения белых паров, затем охлаждают. Добавление воды и нагревание повторяют еще 2 раза.

9.3.2.8. После охлаждения полученный минерализат переносят в мерную колбу на 25 см<sup>3</sup>, доводят до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают.

9.3.2.9. Одновременно с партией проб проводят 2 контрольных опыта для контроля чистоты посуды и реактивов, добавляя в колбу реактивы в тех же количествах, что и в пробы, и точно повторяя все условия, в которых проводят минерализацию пробы.

### 9.3.3. Кислотная экстракция (неполная минерализация)

9.3.3.1. Способ основан на экстракции токсичных элементов из пробы продукта кипячением с разбавленной азотной кислотой и предназначен для растительного и сливочного масел, маргарина, пищевых жиров и сыров.

#### 9.3.3.2. Экстракция проб продукта.

В термостойкую колбу с навеской продукта массой 5—10 г вносят цилиндром 40 см<sup>3</sup> раствора азотной кислоты (1 : 2) по объему.

В колбу добавляют несколько стеклянных шариков, вставляют в нее холодильник, помещают на электроплитку, покрытую асбестом, и кипятят в течение 1,5 ч с момента закипания. Затем содержимое колбы медленно охлаждают до комнатной температуры, не вынимая холодильник.

Колбу с экстракционной смесью сливочного масла, жиров или маргарина с кислотой помещают в холодную водяную баню для затвердевания жира. Затвердевший жир прокалывают стеклянной палочкой, водный слой фильтруют через фильтр, смоченный раствором кислоты, используемой для экстракции, в кварцевую или фарфоровую чашку. Оставшийся в колбе жир расплавляют на водяной бане, добавляют 10 см<sup>3</sup> раствора используемой кислоты, встряхивают, охлаждают, после охлаждения жир прокалывают и промывную жидкость сливают в тот же сосуд через тот же фильтр, затем фильтр промывают 5—7 см<sup>3</sup> воды.

Экстракционную смесь растительного масла с кислотой переносят в делительную воронку. Колбу ополаскивают 10 см<sup>3</sup> раствора используемой кислоты, который сливают в ту же воронку. После разделения слоев нижний водный слой сливают через фильтр, смоченный раствором используемой кислоты, в кварцевую или фарфоровую чашку, затем фильтр промывают 5—7 см<sup>3</sup> воды.

Экстракционную смесь сыра с кислотой фильтруют через фильтр, смоченный раствором используемой кислоты, в кварцевую или фарфоровую чашку. Колбу ополаскивают 10 см<sup>3</sup> раствора кислоты, который фильтруют через тот же фильтр, затем фильтр промывают 5—7 см<sup>3</sup> воды.

**9.3.3.3. Подготовка экстрактов для атомно-абсорбционного анализа.**

Экстракционную смесь, полученную по п. 9.3.3.2, фильтруют в кварцевую или фарфоровую чашку. Жидкость осторожно выпаривают, а затем обугливают на электроплитке. Затем чашку помещают в электропечь и далее продолжают минерализацию по п. 9.3.1.5.

**9.3.3.4. Параллельно в двух колбах проводят экстракцию и подготовку экстрактов к анализу добавляемых к навеске реактивов для контроля их чистоты.**

#### **9.3.4. Автоклавная минерализация**

Процедуру минерализации проб в аналитических автоклавах проводят в соответствии с МУК 4.1.985—00 [2].

**9.3.4.1. Метод основан на полной минерализации пробы смесью азотной кислоты и пероксида водорода в реакционной камере аналитического автоклава с резистивным нагревом.**

**9.3.4.2. Масса пробы для данного вида продукции не должна превышать величину, указанную в табл. 9.1.**

Таблица 9.1

Условия минерализации проб пищевой продукции и продовольственного сырья в автоклаве НПВФ «АНКОН-АТ-2» с реакционной камерой, вместимостью 150 см<sup>3</sup>

Наименование объекта	Масса навески, г	Объем реактивов, см <sup>3</sup>	Экспозиция (комнатная температура)	Температура и время нагрева (ч)	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>1. Фрукты, овощи и продукты их переработки</b>					
Свежие овощи, фрукты	5,0	HNO <sub>3</sub> – 6 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> – 1	–	160 °С – 3 ч	
Листовые овощи: петрушка, укроп, салат	3,0	HNO <sub>3</sub> – 6 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> – 1	–	160 °С – 3 ч	
Консервы ягодные	3,0	HNO <sub>3</sub> – 6 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> – 1	30—40 мин	160 °С – 1 ч 180 °С – 2 ч	
Фрукты сушеные	2,5	HNO <sub>3</sub> – 7 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> – 1	50—60 мин	160 °С – 1 ч 180 °С – 2 ч	
Орехи (грецкие, миндаль, фундук)	2,0	HNO <sub>3</sub> – 7 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> – 1	Заливают на ночь HNO <sub>3</sub> , утром добавляют H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	160 °С – 1 ч 180 °С – 1 ч 200 °С – 2 ч	
Грибы свежие	3,0	HNO <sub>3</sub> – 6 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> – 1	–	160 °С – 1 ч 180 °С – 2 ч	
Грибы сушеные	2,0	HNO <sub>3</sub> – 6 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> – 1	20—30 мин	160 °С – 1 ч 180 °С – 1 ч 200 °С – 2 ч	
<b>2. Мясо и мясопродукты</b>					
Мясо (говядина, баранина, свинина, птица)	2,5	HNO <sub>3</sub> – 6 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> – 1	30—40 мин	160 °С – 1 ч 180 °С – 1 ч 200 °С – 2 ч	Для жирных сортов – заливают на ночь HNO <sub>3</sub> , утром добавляют H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>

Продолжение таблицы 9.1

1	2	3	4	5	6
Колбасные изделия: колбасы вареные, сосиски, сардельки	3,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	30—40 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	
Колбасы сырокопченые, варенокопченые, полукопченые; рулеты	2,5	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	Заливают на ночь $\text{HNO}_3$ , утром добавляют $\text{H}_2\text{O}_2$	160 °С - 1 ч 180 °С - ч 200 °С - 2 ч	
Субпродукты (печень, сердце, легкое, почки)	3,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	30—40 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	
Консервы мясные (паштет, тушенка в собственном соку, фарши)	2,5	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	30—40 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	Для жирных сортов - заливают на ночь $\text{HNO}_3$ , утром добавляют $\text{H}_2\text{O}_2$
<b>3. Рыбные продукты</b>					
Рыба живая, охлажденная, мороженая	3,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	30—40 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 2 ч 200 °С - 1 ч	Для жирных сортов - заливают на ночь $\text{HNO}_3$ , утром добавляют $\text{H}_2\text{O}_2$
Рыба холодного и горячего копчения, жирная	2,0	$\text{HNO}_3 - 7$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	Заливают на ночь $\text{HNO}_3$ , утром добавляют $\text{H}_2\text{O}_2$	160 °С - 1 ч 180 °С - 2 ч 200 °С - 1 ч	
Беспозвоночные (креветки, ракообразные)	3,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	30—40 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 2 ч 200 °С - 1 ч	
Консервы рыбные в собственном соку, в томате	3,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	30—40 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 2 ч 200 °С - 1 ч	-

Продолжение таблицы 9.1

1	2	3	4	5	6
Консервы рыбные в масле	2,0	$\text{HNO}_3 - 7$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	Заливают на ночь $\text{HNO}_3$ , утром добавляют $\text{H}_2\text{O}_2$	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	
<b>4. Зерно и продукты его переработки</b>					
Рожь, пшеница, ячмень, овес, чечевица, соя, фасоль и др. Подсолнечник (семена, жмых, шрот)	2,0  1,5	$\text{HNO}_3 - 8$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 2$	Заливают на ночь $\text{HNO}_3$ , утром добавляют $\text{H}_2\text{O}_2$	160 °С - 1 ч 180 °С - 2 ч 200 °С - 1 ч	Зерно измельчают, смачивают водой до получения однородной массы
Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольной промышленности)	2,0	$\text{HNO}_3 - 8$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 2$	Заливают на ночь $\text{HNO}_3$ , утром добавляют $\text{H}_2\text{O}_2$	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	Смачивают дистиллированной водой до получения однородной массы
Хлеб, хлебобулочные изделия (булки, бублики, сушки, баранки, сухари, палочки)	2,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	20—30 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	Бублики, баранки, сухари, солодку, сушки измельчают и смачивают дистиллированной водой
Макаронные изделия	2,0	$\text{HNO}_3 - 7$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	30—40 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	Измельчают и смачивают дистиллированной водой
<b>5. Растения, корма растительного и животного происхождения</b>					
Травяная мука, силос, сено, солома, зеленая масса	1,5	$\text{HNO}_3 - 8$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	30—40 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	Сухие продукты смачивают дистиллированной водой
Корма животного происхождения (костная, рыбная мука)	1,5	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	30—40 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	Смачивают дистиллированной водой

## Продолжение таблицы 9.1

1	2	3	4	5	6
Пряности, лекарственное сырье растительного и животного происхождения (сухое)	1,5	$\text{HNO}_3 - 7$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	20—30 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 2 ч 200 °С - 1 ч	Смачивают дистиллированной водой
<b>6. Кондитерские изделия</b>					
Печенье, вафли, галеты, пряники и др.	2,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	30—40 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	Смачивают дистиллированной водой
Торты, рулеты и пирожные с кремом	2,0	$\text{HNO}_3 - 7$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	Заливают на ночь $\text{HNO}_3$ , утром добавляют $\text{H}_2\text{O}_2$	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	
Пастила, мармелад	3,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	30—40 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 1 ч	
Шоколад, конфеты	2,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	30—40 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	Измельчают до частиц размером 1 мм
Халва	2,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	30—40 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	
Сахар-рафинад, песок	2,0	$\text{HNO}_3 - 8$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	30—40 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 2 ч 200 °С - 1 ч	Смачивают дистиллированной водой
<b>7. Пищевые концентраты</b>					
Завтраки сухие	2,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	20—30 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 2 ч	Смачивают дистиллированной водой
Соусы кулинарные порошкообразные, бульонные кубики	2,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	20—30 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 1 ч	Смачивают дистиллированной водой до однородной массы

Продолжение таблицы 9.1

1	2	3	4	5	6
Чай, кофе	2,0	$\text{HNO}_3 - 8$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	20—30 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	Смачивают дистиллированной водой до однородной массы
Яичный порошок	2,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	30—40 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 1 ч	Смачивают дистиллированной водой до получения однородной массы
<b>8. Молочные продукты</b>					
Сливки	2,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	30—40 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	
Кисломолочные продукты (творог, творожные изделия, кефир, йогурт)	3,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	30—40 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 2 ч 200 °С - 1 ч	
Сухие молочные продукты	2,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	Заливают на ночь $\text{HNO}_3$ , утром добавляют $\text{H}_2\text{O}_2$	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	Смачивают дистиллированной водой до однородной массы
Творог, творожные изделия	2,5	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	20—30 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 2 ч 200 °С - 1 ч	
Сыры	2,5	$\text{HNO}_3 - 7$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	Заливают на ночь $\text{HNO}_3$ , утром добавляют $\text{H}_2\text{O}_2$	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	
Молоко сгущенное	3,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	20—30 мин	160 °С - 1 ч 180 °С - 1 ч 200 °С - 2 ч	
Мороженое	5,0	$\text{HNO}_3 - 6$ $\text{H}_2\text{O}_2 - 1$	—	160 °С - 1 ч 180 °С - 2 ч	

Продолжение таблицы 9.1

1	2	3	4	5	6
<b>9. Растительные масла и животные жиры</b>					
Масла растительные	1,0	HNO <sub>3</sub> – 6 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> – 1	Заливают на ночь HNO <sub>3</sub> , утром добавляют H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	160 °С – 1 ч 180 °С – 1 ч 200 °С – 2 ч	
Масло сливочное	1,0	HNO <sub>3</sub> – 6 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> – 1	Заливают на ночь HNO <sub>3</sub> , утром добавляют H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	160 °С – 1 ч 180 °С – 1 ч 200 °С – 2 ч	
Продукты переработки растительных масел (маргарин, кулинарный жир, майонез)	2,0	HNO <sub>3</sub> – 6 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> – 1	Заливают на ночь HNO <sub>3</sub> , утром добавляют H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	160 °С – 1 ч 180 °С – 1 ч 200 °С – 2 ч	
<b>10. Напитки</b>					
Напитки безалкогольные, соки	10,0	HNO <sub>3</sub> – 6 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> – 1	20 мин	160 °С – 1 ч 180 °С – 2 ч	
Напитки алкогольные, пиво	5,0				Добавлять кислоту небольшими порциями во избежание бурного протекания реакции
Ликеры	3,0	HNO <sub>3</sub> – 6 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> – 1	40—60 мин	160 °С – 1 ч 180 °С – 1 ч 200 °С – 1 ч	

9.3.4.3. При подготовке аналитической пробы не допускается использование инструментов и оборудования, загрязняющих пробу определяемыми элементами.

9.3.4.4. Навеску пробы помещают в реакционную емкость, добавляют смесь реактивов и выдерживают при комнатной температуре согласно табл. 9.1.

9.3.4.5. Для приготовления раствора контрольного («холостого») опыта в реакционную емкость помещают только смесь реактивов без добавления испытуемой пробы.



9.3.4.6. Реакционную емкость закрывают крышкой и герметизируют в металлическом корпусе автоклава.

9.3.4.7. Автоклавы помещают в холодные термостаты, устанавливают на пульте управления температуру, согласно табл. 9.1, и нагревают автоклавы в течение времени, указанного в табл. 9.1

Время выдерживания при минимальной температуре (160 °С) отсчитывается с момента достижения этой температуры в печи, что фиксируется установлением стрелки датчика на нулевую отметку.

9.3.4.8. По окончании минерализации автоклавы извлекают из термостата с помощью приспособления для переноса, помещают в устройство для охлаждения и охлаждают до комнатной температуры (30—60 мин, в зависимости от режима нагрева и состава продукта), после чего проводят разгерметизацию автоклава.

9.3.4.9. Полученный минерализат количественно переносят из реакционной камеры автоклава в мерную колбу, вместимостью 25 см<sup>3</sup>, и доводят до метки дистиллированной водой. Раствор минерализата должен быть бесцветным. Наличие желтой окраски свидетельствует о неполной минерализации.

9.3.4.10. В случае получения желтого раствора после автоклавного разложения (неполная минерализация) минерализат количественно переносят в фарфоровый или стеклянный тигель (чашку), ополаскивая автоклав и крышку небольшим количеством бидистиллированной (деионизованной) воды, и осторожно упаривают на водяной бане досуха.

9.3.4.11. Полученный после упаривания остаток коричневого или черного цвета осторожно обрабатывают на водяной бане небольшим количеством (0,5—1,0 см<sup>3</sup>) раствора азотной кислоты (1 : 1) и несколькими каплями пероксида водорода и снова упаривают до сухих солей. Обработку повторяют до тех пор, пока зола не станет белой или слегка окрашенной, без обугленных частиц.

9.3.4.12. Переведение золы в раствор проводят в соответствии с п. 9.3.1.7.

#### *9.4. Разбавление растворов минерализата*

9.4.1. Разбавление растворов минерализата пробы производят в соответствии с массой навески пробы ( $M$ , г) и фактором разбавления ( $k$ ), максимальные значения которого для прибора «Квант-Z.ЭТА» приведены в табл. 9.2. Фактор разбавления выбирается в зависимости от содержания определяемого элемента в пробе и чувствительности прибора. Необходимо помнить, что содержание определяемого элемента в полученном после разбавления анализируемом растворе должно находиться в пределах градуировки прибора.

9.4.2. Перестраиваемой микропипеткой (200—1000 мкл) отбирают аликвоту (1000—1000 еМ/к) мкл бидистиллированной воды и переносят ее в пробирку типа «Эппендорф», вместимостью 1,5—2,0 см<sup>3</sup>, затем перестраиваемой микропипеткой (10—100 мкл) отбирают аликвоту 1000М/к мкл раствора минерализата пробы (п. 9.3.4) и также помещают ее в пробирку. Полученный раствор тщательно перемешивают. Перестраиваемой микропипеткой (1—10 мкл) отбирают аликвоту 2 мкл раствора нитрата палладия с массовой концентрацией 10 мг/см<sup>3</sup> (п. 8.2.2), переносят в пробирку с разбавленным раствором минерализата и тщательно перемешивают. Полученный раствор анализируют.

9.4.3. Перестраиваемой микропипеткой (200—1000 мкл) отбирают аликвоту 1000 мкл полученного по п. 9.3.4 раствора контрольного опыта и переносят ее в пробирку типа «Эппендорф». Перестраиваемой микропипеткой (1—10 мкл) отбирают аликвоту 2 мкл раствора нитрата палладия с массовой концентрацией 10 мг/см<sup>3</sup> (п. 8.2.2), переносят в пробирку с раствором холостого опыта и тщательно перемешивают. Полученный раствор анализируют.

Таблица 9.2

Рекомендуемые факторы разбавления (*k*) раствора минерализата для различных групп пищевых продуктов

Наименование сырья и продукции	Элемент	
	Pb	Cd
1	2	3
Мясо и птица	10М	10М
Колбасы и кулинарные изделия из мяса и птицы	10М	10М
Консервы мясные и мясорастительные	10М	10М
Субпродукты животных и птиц	12М	60М
Почки и продукты их переработки	20М	200М
Яйца	6М	2М
Яичный порошок	60М	20М
Молоко и кисломолочные изделия	2М	6М
Молоко сгущенное	6М	6М
Молоко сухое	2М	6М
Сыры и творожные изделия	6М	10М

Продолжение таблицы 9.2

1	2	3
Рыба свежая, охлажденная, мороженая, консервы	20М	40М
Икра, моллюски и ракообразные	200М	400М
Хлеб	6М	10М
Зерновые и зернобобовые, мука, крупы, макаронные изделия, бараночные и сухарные изделия	10М	20М
Сахар-песок, какао, шоколад	20М	10М
Конфеты и подобные изделия	20М	20М
Кофе	20М	10М
Печенье	10М	20М
Овощи, фрукты, ягоды свежие, свежемороженые и консервированные, грибы	10М	6М
Чай	200М	200М
Специи и пряности	100М	40М
Масло растительное, сливочное, маргарин, животные жиры	2М	10М
Соль поваренная	40М	20М
Крахмал	10М	20М
Желатин	40М	6М

### 9.5. Измерение концентрации элементов

9.5.1. Измерение концентрации элемента в разбавленном испытуемом растворе минерализата пробы и в растворе контрольного («холостого») опыта производят согласно техническому описанию и инструкции по эксплуатации АА спектрометра.

9.5.2. Аликвоту анализируемой пробы объемом 5 мкл (при использовании прибора «Квант-З.ЭТА») с помощью микропипетки вводят в графитовую печь электротермического атомизатора и включают программу нагрева графитовой печи. При использовании других спектрометров выбор аликвоты производят в соответствии с рекомендациями Руководства по эксплуатации.

9.5.3. После окончания программы нагрева и индикации результатов измерения на дисплее персонального компьютера считывают значение массовой концентрации элемента в анализируемом растворе.

9.5.4. Измерение концентрации в данной пробе производят два раза, регистрируя измеренные значения  $X_1$  и  $X_2$ . За результат измерения принимают среднее арифметическое значение:

$$X = (X_1 + X_2) / 2 \quad (2)$$

Расхождение между значениями  $X_1$  и  $X_2$  не должно превышать 5 %, т. е.:

$$|X_1 - X_2| / X \leq 0,05 \quad (3)$$

Если условие (3) не выполняется, измерение повторяют. При повторном нарушении условия (3) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

### 10. Вычисление результата анализа

Массовую долю элемента в пробах пищевых продуктов и пищевого сырья в мг/кг рассчитывают по формуле:

$$m = \frac{(Xk - X_0) V}{M}, \text{ где} \quad (4)$$

$X$  – массовая концентрация элемента в анализируемом растворе, мг/дм<sup>3</sup>;

$X_0$  – массовая концентрация элемента в растворе контрольного опыта, мг/дм<sup>3</sup>;

$k$  – фактор разбавления, использованный при подготовке раствора пробы к анализу;

$V$  – объем раствора минерализата, в который переведена навеска, дм<sup>3</sup>;

$M$  – навеска пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений  $m_1$  и  $m_2$ .

$$\bar{m} = \frac{m_1 + m_2}{2} \quad (5)$$

если расхождение между ними не превышает норматива оперативного контроля сходимости  $d$ :

$$|m_1 - m_2| \leq d, \text{ где} \quad (6)$$

$d = d_{\text{опт}} \bar{m} / 100$ . Значения  $d_{\text{опт}}$  приведены в табл. 2.3.

При превышении норматива оперативного контроля сходимости измерения повторяют. При повторном превышении норматива *d* выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

### 11. Форма представления результата анализа

Результат измерения массовой доли элемента в пробах пищевых продуктов и пищевого сырья в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде:

$$(\bar{m} \pm \Delta) \text{ мг/кг, где} \quad (7)$$

$\bar{m}$  – массовая доля элемента в продукте, мг/кг;

$\Delta$  – абсолютная погрешность измерений массовой доли элемента ( $\bar{m}$ ), мг/кг, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

Значение  $\Delta$  рассчитывают по формуле:

$$\Delta = \frac{\delta \cdot \bar{m}}{100}, \text{ где} \quad (8)$$

$\delta$  – значение относительной погрешности измерения массовой доли элемента, приведенное в табл. 2.3.

Значения массовой доли элемента в пробе ( $\bar{m}$ ) и абсолютной погрешности ( $\Delta$ ) должны содержать одинаковое число знаков после запятой.

### 12. Контроль погрешности измерений

Контроль точности результатов анализа проводят согласно МИ 2335 [3].

#### 12.1. Оперативный контроль сходимости

Оперативный контроль сходимости проводят для каждой анализируемой пробы пищевого продукта в соответствии с алгоритмом, приведенным в п. 10.

#### 12.2. Оперативный контроль воспроизводимости

Образцами для контроля являются реальные пробы пищевых продуктов и пищевого сырья. Масса отобранной для контроля пробы должна соответствовать удвоенной массе, необходимой для проведения анализа по методике. Отобранную массу делят на две равные части и анализируют в точном соответствии с прописью методики в разное время, получая два результата (первичный –  $\bar{m}_1$  и повторный –  $\bar{m}_2$ ), причем в этом случае максимально варьируют условия проведения

анализа; если возможно – анализ выполняют разные операторы на разных приборах.

Оперативный контроль воспроизводимости проводят путем сравнения результата контрольной процедуры  $D_k$ , равного расхождению между двумя полученными результатами измерений ( $\bar{m}_1$  и  $\bar{m}_2$ ) с нормативом оперативного контроля воспроизводимости  $D$ , т. е.:

$$D_k = |\bar{m}_1 - \bar{m}_2| \leq D, \text{ где} \quad (9)$$

$D = D_{\text{омн}} \bar{m} / 100$ . Значения  $D_{\text{омн}}$  приведены в табл. 2.3.

При превышении норматива оперативного контроля воспроизводимости эксперимент повторяют. При повторном превышении норматива  $D$  выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

### *12.3. Оперативный контроль погрешности (точности) методики*

Оперативный контроль погрешности методики осуществляют с использованием образцов для контроля или методом добавок известного количества определяемого элемента в реальные пробы пищевых продуктов.

#### **12.3.1. Алгоритм проведения оперативного контроля погрешности (точности) с использованием образцов для контроля**

Образцами для оперативного контроля точности являются стандартные образцы состава пищевых продуктов или аттестованные смеси, приготовленные в соответствии с МИ 2334 [4]. Погрешность аттестованного значения определяемого элемента в образце для контроля не должна превышать третьей части величины погрешности методики для этого значения.

Алгоритм проведения оперативного контроля точности с применением образцов для контроля состоит в сравнении результата контрольной процедуры  $K_k$ , равного разности между результатом контрольного измерения аттестованной характеристики в образце для контроля  $\bar{m}$  и его аттестованным значением  $m_{\text{ко}}$  с нормативом оперативного контроля точности –  $K$ .

Точность результата контрольного измерения ( $\bar{m}$ ), а также точность результатов анализа рабочих проб, выполненных за период, в течение которого условия проведения анализа принимают стабильными и соответствующими условиям проведения контрольного измерения, признают удовлетворительной, если:

$$K_{\kappa} = |\bar{m} - \bar{m}_{\text{ко}}| \leq K, \text{ где} \quad (10)$$

$K$  – норматив оперативного контроля погрешности.

Норматив оперативного контроля погрешности рассчитывают по формулам:

- при проведении внутрилабораторного контроля ( $P = 0,90$ ):

$$K = 0,848 \bar{m} / 100 \quad (11)$$

- при проведении внешнего контроля ( $P = 0,95$ ):

$$K = \delta \bar{m} / 100 \quad (12)$$

При превышении норматива оперативного контроля погрешности контрольный эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива погрешности выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

#### 12.3.2. Алгоритм проведения оперативного контроля погрешности (точности) с использованием метода добавок

Масса отобранной для контроля рабочей пробы должна соответствовать удвоенной массе, необходимой для проведения анализа по методике. Отобранную массу пробы делят на две равные части, первую из которых анализируют в точном соответствии с прописью методики и получают средний из 2-х параллельных определений результат анализа исходной рабочей пробы –  $m$ ; ко второй делают добавку определяемого элемента (с использованием аттестованных градуировочных растворов), причем величина добавки должна составлять 50—150 % от содержания элемента в исходной пробе. Пробу с добавкой анализируют в точном соответствии с прописью методики, получая средний из 2-х параллельных определений результат анализа рабочей пробы с добавкой –  $m_g$ . Результат анализа пробы с введенной добавкой не должен выходить за верхнюю границу определяемых содержаний.

Сравнивают результат контрольной процедуры ( $K_{\kappa}$ ), равный разности между результатом контрольного измерения пробы с добавкой ( $m_g$ ), пробы без добавки ( $\bar{m}$ ) и величиной добавки ( $g$ ) с нормативом оперативного контроля погрешности ( $K_{\delta}$ ).

Результаты оперативного контроля погрешности методики считают удовлетворительными, если выполняется условие:

$$K_{\kappa} = |m_g - m - g| \leq K_{\delta} \quad (13)$$

Норматив оперативного контроля погрешности ( $K_\delta$ ) рассчитывают по формулам:

- при проведении внутрилабораторного контроля ( $P = 0,90$ ):

$$K_\delta = 0,84 \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_2^2}, \text{ где} \quad (14)$$

$\Delta_1$  и  $\Delta_2$  – абсолютные погрешности определения массовой доли элемента в пробе без добавки и с добавкой соответственно рассчитываемые по формуле (8), для значений  $m$  и  $m_g$

- при проведении внешнего контроля ( $P = 0,95$ ):

$$K_\delta = \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_2^2} \quad (15)$$

В случае если значение массовой доли элемента в исходной пробе продукта меньше нижней границы диапазона измерений, то добавка должна составлять величину, в 2—5 раз превышающую концентрацию, соответствующую нижней границе диапазона измерений элемента. В этом случае норматив оперативного контроля погрешности методики (для  $P = 0,90$ ) рассчитывают по формуле:

$$K_\delta = 0,84\Delta, \text{ где} \quad (16)$$

$\Delta$  – абсолютная погрешность определения массовой доли элемента в пробе с добавкой.

При превышении норматива оперативного контроля погрешности измерения повторяют. При повторном превышении норматива  $K_\delta$  выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

12.4. Периодичность контроля устанавливается самой лабораторией с учетом фактического состояния аналитических работ.



**13. Список литературы**

1. ГОСТ 26929—94. Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов.
2. МУК 4.1.985—00. Определение содержания токсичных элементов в пищевых продуктах и продовольственном сырье. Методика автоклавной пробоподготовки.
3. МИ 2335—95. Рекомендация. ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.
4. МИ 2334—95. Рекомендация. ГСИ. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке.