

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

**Измерения концентраций вредных веществ  
в воздухе рабочей зоны**

**Сборник методических указаний  
МУК 4.1.3421—4.1.3432—17**

**Выпуск 59**

Издание официальное

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

**Измерения концентраций вредных веществ  
в воздухе рабочей зоны**

**Сборник методических указаний  
МУК 4.1.3421—4.1.3432—17**

**Выпуск 59**

ББК 51.24  
ИЗ7

**ИЗ7 Измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Сборник методических указаний. Вып. 59.—М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2017.—144 с.**

ISBN 978—5—7508—1567—8

1. Подготовлены коллективом авторов ФГБНУ «Научно-исследовательского института медицины труда» (Л. Г. Макеева – руководитель, Н. С. Горячев, Е. Н. Грицун, Н. Л. Полуэктова), ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора (В. Г. Сенникова, В. Н. Малхожева, Л. С. Осипова).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол от 22 декабря 2016 г. № 2).

3. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А. Ю. Поповой 21 февраля 2017 г.

4. Введены впервые.

**ББК 51.24**

Ответственный за выпуск Н. В. Карташёва

Редактор Л. С. Кучурова  
Компьютерная верстка Е. В. Ломановой

Подписано в печать 18.09.17

Формат 60x84/16

Тираж 125 экз.

Печ. л. 9,0  
Заказ 64

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
127994, Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 5, 7

Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован  
отделением издательского обеспечения отдела научно-методического обеспечения  
Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора  
117105, Москва, Варшавское ш., 19а

Реализация печатных изданий, тел./факс: 8 (495) 952-50-89

© Роспотребнадзор, 2017

## Содержание

Введение .....	5
Измерение массовой концентрации транс-4-(аминометил)цикло- гексанкарбоновой кислоты (транксамовая кислота) в воздухе рабочей зоны методом спектрофотометрии: МУК 4.1.3421—17 .....	6
Измерение массовой концентрации (R*,R*)-(±)-N-[2-гидрокси-5-[1- гидрокси-2-[[2-(4-метоксифенил)-1-метилэтил]амино]этил фенил]формамида фумарата (2 : 1) дигидрата (формотерола фумарат дигидрат) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3422—17 .....	16
Измерение массовой концентрации 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоната тринатрия дигидрата (натрий лимоннокислый трехзамещенный дигидрат, тринатрия цитрат дигидрат) в воздухе рабочей зоны методом спектрофотометрии: МУК 4.1.3423—17 .....	28
Измерение массовой концентрации 6-[O-(1,1-диметилэтил)-D-серин]-9-(N- этил-L-пролинамид)-10-деглицинамид рилизинг-фактор лютеинизирующего гормона (свиного) ацетата (бусерелина ацетат) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3424—17 .....	38
Измерение массовой концентрации 2-[2-(4-дibenzo[b,f][1,4]тиазепин-1-ил- 1-пиперазинил)этокс]этанола фумарата (2 : 1) (кветиапина фумарат) в воздухе рабочей зоны методом спектрофотометрии: МУК 4.1.3425—17 .....	50
Измерение массовой концентрации (1S,2S,3R,5S)-3-[7-{{(1R,2S)-2-(3,4- дифторфенил) циклопропил}амино}-5-(пропилтио)-3H-1,2,3-триазоло[4,5- d]пиримидин-3-ил]-5-(2-гидроксиэтокс) циклоптан-1,2-диола (тикагрелор) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3426—17 .....	60
Измерение массовой концентрации комплексного соединения инозина с солью моно[4-(ацетиламино)бензоата] с 1-(диметиламино)-2-пропанолом (1 : 3) (инозин пранобекс) в воздухе рабочей зоны методом спектрофотометрии: МУК 4.1.3427—17 .....	72
Измерение массовой концентрации натрия додецилсульфата (натрий лаурилсульфат) в воздухе рабочей зоны методом спектрофотометрии: МУК 4.1.3428—17 .....	82
Измерение массовой концентрации 5-метокси-2-[(S)-[(4-метокси-3,5- диметил-2-пиридинил)метил]сульфинил]-1H-бензимидазола магния тригидрата (соль) (эзомепразол магния тригидрат) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ): МУК 4.1.3429—17 .....	94
Измерение массовой концентрации (±)-1-[4-(2-метоксиэтил)фенокс]-3-[(1- метилэтил)амино]-2-пропанола тартрата (2 : 1) (метопролола тартрат) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3430—17 .....	107

Измерение массовой концентрации $\alpha, \alpha', \alpha'$ -тетрамстил-5-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-бензолдиациетонитрила (анастрозол) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3431—17.....	119
Измерение массовой концентрации ( $\pm$ )-2-этокси-1-[[2'-(1H-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]метил]-1H-бензимидазол-7-карбоновой кислоты 1-[[циклогексилокси карбонил]окси]этилового эфира (кандесартана цилексетил, кандесартан) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3432—17.....	130
<i>Приложение 1.</i> Приведение объема воздуха к стандартным условиям.....	142
<i>Приложение 2.</i> Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным условиям .....	143
<i>Приложение 3.</i> Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ.....	144

## Введение

Сборник методических указаний «Измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (выпуск 59) разработан с целью обеспечения контроля соответствия фактических концентраций вредных веществ их предельно допустимым концентрациям (ПДК) и ориентировочным безопасным уровням воздействия (ОБУВ) и является обязательным при осуществлении санитарного контроля.

Включенные в данный сборник методические указания по контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны разработаны и подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.016—79 «Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ» с изм. 1, ГОСТ 12.1.005—88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» с изм. 1, ГОСТ Р 8.563—09 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений», ГОСТ Р ИСО 5725—02 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений».

Методики выполнены с использованием современных методов исследования, метрологически аттестованы и дают возможность контролировать концентрации химических веществ на уровне и ниже их ПДК и ОБУВ в воздухе рабочей зоны, установленных в ГН 2.2.5.1313—03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и ГН 2.2.5.2308—07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и дополнениях к ним.

Методические указания по измерению массовых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны предназначены для лабораторий центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, санитарных лабораторий промышленных предприятий при осуществлении контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также научно-исследовательских институтов и других заинтересованных министерств и ведомств.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека,  
Главный государственный санитарный  
врач Российской Федерации

А. Ю. Попова

21 февраля 2017 г.

**4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

**Измерение массовой концентрации  
(±)-1-[4-(2-метоксиэтил)фенокси]-3-[(1-метилэтил)  
амино]-2-пропанола тартрата (2 : 1) (метопролола  
тартрат) в воздухе рабочей зоны методом  
высокоэффективной жидкостной хроматографии**

**Методические указания**

**МУК 4.1.3430—17**

---

Свидетельство о государственной метрологической аттестации  
№ 01.00225/205-11-16.

**1. Назначение и область применения**



Настоящие методические указания устанавливают порядок применения метода высокоэффективной жидкостной хроматографии для измерений массовой концентрации метопролола тартрата в воздухе рабочей зоны в диапазоне массовых концентраций от 0,15 до 1,50 мг/м<sup>3</sup>.

Методические указания носят рекомендательный характер.

**2. Характеристика вещества**

**2.1. Физико-химические свойства**

Метопролола тартрат

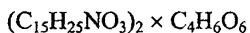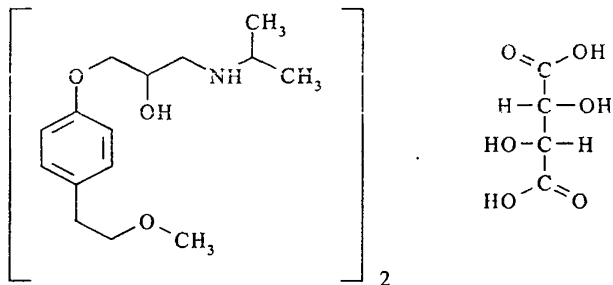

Молекулярная масса: 684,9.

Регистрационный номер CAS: 56392-17-7.

Метопролола тартрат – белый кристаллический порошок с температурой плавления 120 °С, очень легко растворим в воде, легко растворим в метилхлориде, хлороформе и спирте этиловом; практически нерастворим в диэтиловом эфире и ацетоне.

Агрегатное состояние в воздухе – аэрозоль.

### 2.2. Токсикологическая характеристика

Метопролола тартрат относится к кардиоселективным блокаторам  $\beta$ -адренорецепторов, применяется в качестве гипотензивного, антиангинального и антиаритмического средства; умеренно опасен при поступлении внутрь, обладает общетоксическим действием.

Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) метопролола тартрата в воздухе рабочей зоны 0,3 мг/м<sup>3</sup>.

### 3. Погрешность измерений

При соблюдении всех регламентированных условий и проведении анализа в точном соответствии с данной методикой при выполнении измерений массовой концентрации метопролола тартрата метрологические характеристики не превышают значений, представленных в табл. 1 (при доверительной вероятности  $P = 0,95$ ).



Таблица 1

## Метрологические характеристики

Диапазон измерений массовой концентрации метопролола тартрата, мг/м <sup>3</sup>	Показатель точности (границы относительной погрешности), $\pm\delta$ , % при $P = 0,95$	Показатель повторяемости (относительное среднее квадратическое отклонение повторяемости), $\sigma_r$ , %	Показатель воспроизводимости (относительное среднее квадратическое отклонение воспроизводимости), $\sigma_R$ , %	Предел повторяемости, $r$ , %, $P = 0,95$ , $n = 2$	Критическая разность для результатов анализа, полученных в двух лабораториях, $CD_{0,95}$ , % ( $n_1 = n_2 = 2$ )
От 0,15 до 1,0 вкл.	14	2,5	4	7	10
Св. 1,0 до 1,5 вкл.	11	1,5	3	4	8

## 4. Метод измерений

Измерение массовой концентрации метопролола тартрата выполняют методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с ультрафиолетовым спектрофотометрическим (УФ) детектированием. Метод основан на разделении метопролола тартрата и других компонентов анализируемой смеси на хроматографической колонке, заполненной сорбентом, с последующей регистрацией метопролола тартрата с помощью ультрафиолетового детектора. Сигнал детектора прямо пропорционален концентрации метопролола тартрата.

Измерение проводят при длине волны 280 нм.

Отбор проб проводят с концентрированием на аналитические аэрозольные фильтры.

Минимально определяемое количество метопролола тартрата в хроматографируемом объеме раствора пробы – 0,1 мкг.

Нижний предел измерения массовой концентрации метопролола тартрата в воздухе 0,15 мг/м<sup>3</sup> (при отборе 67,0 дм<sup>3</sup> воздуха).

Метод специфичен в условиях приготовления лекарственных форм на основе метопролола тартрата. Измерению не мешают вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, карбоксиметилкрахмал натрия, кремния диоксид коллоидный, повидон, магния стеарат.

## 5. Средства измерений, реактивы, вспомогательные устройства и материалы

### 5.1. Средства измерений

Хроматограф жидкостный с ультрафиолетовым (УФ) детектором

Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 г, предел допустимой погрешности взвешивания  $\pm 0,2$  мг

ГОСТ OIML R 76-1—11

Аспирационное устройство двухканальное с диапазоном расхода 2,0—20,0 дм<sup>3</sup>/мин с пределом допустимой погрешности  $\pm 5$  %

ТУ 4215-000-11696625—03

Иономер лабораторный типа рН-121 с пределом рН от  $-1$  до  $+19$  ед.

ГОСТ 22261—76

Колбы мерные, 2-50-2, 2-100-2, 2-1000-2

ГОСТ 1770—74

Пробирки мерные с шлифованными пробками, П-2-10-14/23 ХС

ГОСТ 1770—74

Цилиндры мерные, 3-100, 1-1000

ГОСТ 1770—74

Микрошприц М-100 вместимостью 100 мм<sup>3</sup>

ГОСТ 8043—74

**Примечание.** Допускается использование средств измерений с аналогичными или лучшими техническими характеристиками.

### 5.2. Реактивы

Метопролола тартрат с содержанием основного вещества не менее 99,0 % в пересчете на сухое вещество. Сертификат анализа 10.07.2014

Ацетонитрил, осч

ТУ 6-09-14-2167—84

Калий фосфорнокислый однозамещенный, хч

ГОСТ 4198—75

Кислота ортофосфорная, чда, 85%-й раствор, плотность  $\rho = 1,698$  г/см<sup>3</sup>

ГОСТ 6552—80

Вода дистиллированная

ГОСТ 6709—72

Вода осч

ТУ 6-09-2502—77

**Примечание.** Допускается использование реактивов с более высокой квалификацией.

### 5.3. Вспомогательные устройства и материалы

Колонка аналитическая, размером 150 × 4,6 мм, заполненная сорбентом С18 с размером частиц 3,5 мкм

Аналитические аэрозольные фильтры гидрофобные на основе перхлорвинила с площадью рабочей поверхности 10 см <sup>2</sup> (фильтры)	ТУ 95-1892—89
Фильтродержатели	ТУ 95.72.05—77
Мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм	ТУ 9471-002-10471723—03
Бюксы стеклянные, СВ 24/10	ГОСТ 25336—82
Палочки стеклянные	ГОСТ 25336—82
Воронки химические	ГОСТ 25336—82
Дистиллятор	ГОСТ Р 50444—92
Шкаф сушильный	ТУ 61-1-721—79

**Примечание.** Допускается применение оборудования с аналогичными или лучшими техническими характеристиками.

## 6. Требования безопасности

**6.1.** При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, установленные для работы с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами по ГОСТу 12.1.007—76, ГОСТу 12.1.005—88 с изменением № 1.

**6.2.** При проведении анализов горючих и вредных веществ должны соблюдаться требования противопожарной безопасности по ГОСТу 12.1.004—91. Должны быть в наличии средства пожаротушения по ГОСТу 12.4.009—83. Необходимо провести обучение работающих правилам безопасности труда согласно ГОСТу 12.0.004—90.

**6.3.** При выполнении измерений с использованием жидкостного хроматографа соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТом 12.1.019—09 и инструкцией по эксплуатации прибора.

**6.4.** Помещение лаборатории должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК (ОБУВ), установленных ГН 2.2.5.1313—03 и ГН 2.2.5.2308—07.

## 7. Требования к квалификации оператора

К выполнению измерений и обработке их результатов допускается специалист, имеющий высшее образование, опыт работы в химической лаборатории, прошедший обучение и владеющий техникой анализа методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, освоивший метод анализа в процессе тренировки и уложившийся в нормативы оперативного контроля при проведении процедур контроля погрешности анализа.

## 8. Требования к условиям измерений

8.1. Условия приготовления растворов и подготовки проб к анализу:

- температура воздуха (20 ± 5) °С;
- атмосферное давление (84—106) кПа;
- относительная влажность воздуха, не более 80 %.

8.2. Выполнение измерений на жидкостном хроматографе проводят в условиях, рекомендованных технической документацией к прибору.

## 9. Подготовка к выполнению измерений

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: приготовление растворов, подготовка жидкостного хроматографа, установление градуировочной характеристики, отбор проб воздуха.

### 9.1. Приготовление растворов

9.1.1. Основной раствор метопролола тартрата с массовой концентрацией 500 мг/см<sup>3</sup> готовят растворением (0,0500 ± 0,0002) г метопролола тартрата в смеси ацетонитрила и воды особо чистой в соотношении 1 : 4 (по объему) в мерной колбе вместимостью 100 см<sup>3</sup>.

Раствор устойчив в течение недели при хранении в холодильнике.

9.1.2. Рабочий раствор метопролола тартрата с массовой концентрацией 100 мкг/см<sup>3</sup> готовят разбавлением 10,0 см<sup>3</sup> основного раствора метопролола тартрата смесью ацетонитрила и воды особо чистой в соотношении 1 : 4 (по объему) в мерной колбе вместимостью 50 см<sup>3</sup>.

Раствор устойчив в течение недели при хранении в холодильнике.

9.1.3. Приготовление смеси: ацетонитрил и вода особо чистая в соотношении 1 : 4 (по объему). В мерной колбе вместимостью 1 000 см<sup>3</sup> смешивают 200 см<sup>3</sup> ацетонитрила и 800 см<sup>3</sup> воды особо чистой.

Раствор устойчив в течение месяца при хранении в холодильнике.

9.1.4. Фосфатный буферный раствор с pH 4,5. Навеску калия фосфорнокислого однозамещенного в количестве 6,81 г помещают в мерную колбу вместимостью 1 000 см<sup>3</sup>, прибавляют воды особо чистой и перемешивают до растворения вещества. Затем доводят объем водой особо чистой до метки и перемешивают. Устанавливают pH полученного раствора равным 4,5 ± 0,2 путем прибавления кислоты ортофосфорной 85%-й с потенциометрическим контролем.

Раствор устойчив в течение месяца при хранении в холодильнике.

9.1.5. Подвижная фаза: смесь ацетонитрила и фосфатного буферного раствора с pH 4,5 в соотношении 1 : 4 (по объему). В мерной колбе вместимостью 1 000 см<sup>3</sup> смешивают 200 см<sup>3</sup> ацетонитрила и 800 см<sup>3</sup> фосфатного буферного раствора с pH 4,5. Перед использованием

подвижную фазу фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм и дегазируют.

Хранят в хорошо укупоренной таре в защищенном от света месте в течение недели.

### 9.2. Подготовка хроматографа

Подготовку хроматографа проводят в соответствии с руководством по его эксплуатации.

### 9.3. Установление градуировочной характеристики

Градуировочную характеристику, выражающую зависимость площади пиков (приборные единицы) от содержания метопролола тартрата в хроматографируемом объеме градуировочных растворов, устанавливают по методу абсолютной градуировки по шести сериям измерений по шести концентрациям вещества в каждой серии согласно табл. 2.

Таблица 2

Растворы для установления градуировочной характеристики при определении метопролола тартрата

Номер градуировочного раствора	Объем основного раствора с концентрацией метопролола тартрата 500 мкг/см <sup>3</sup> , см <sup>3</sup>	Объем рабочего раствора с концентрацией метопролола тартрата 100 мкг/см <sup>3</sup> , см <sup>3</sup>	Содержание метопролола тартрата на фильтре, мкг	Массовая концентрация метопролола тартрата в градуировочном растворе, мкг/см <sup>3</sup>	Содержание метопролола тартрата в хроматографируемом объеме градуировочного раствора, мкг
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,1	10,0	1,0	0,1
3	0,0	0,2	20,0	2,0	0,2
4	0,0	0,4	40,0	4,0	0,4
5	0,12	0,0	60,0	6,0	0,6
6	0,16	0,0	80,0	8,0	0,8
7	0,20	0,0	100,0	10,0	1,0

Градуировочные растворы используют свежеприготовленными. Растворы устойчивы в течение суток при хранении в холодильнике.

На фильтры, помещенные в бюксы, пипеткой вместимостью 1 см<sup>3</sup> наносят основной раствор метопролола тартрата с массовой концентрацией 500 мкг/см<sup>3</sup> и рабочий раствор метопролола тартрата с массовой концентрацией 100 мкг/см<sup>3</sup> в соответствии с табл. 2. Фильтры подсушивают при комнатной температуре, затем, используя пипетку вместимо-

стью 5,0 см<sup>3</sup>, приливают по 5,0 см<sup>3</sup> смеси ацетонитрила и воды особо чистой в соотношении 1 : 4 (по объему) и оставляют на 15 минут, периодически помешивая стеклянной палочкой для лучшего растворения вещества. Затем фильтры тщательно отжимают, растворы сливают в мерные пробирки вместимостью 10 см<sup>3</sup>. Фильтры повторно обрабатывают 5 см<sup>3</sup> смеси ацетонитрила и воды особо чистой в соотношении 1 : 4 (по объему) и оставляют на 15 минут, периодически помешивая стеклянной палочкой, затем фильтры тщательно отжимают и удаляют. Растворы сливают в те же пробирки и доводят объем раствора до 10,0 см<sup>3</sup> смесью ацетонитрила и воды особо чистой в соотношении 1 : 4 (по объему). Далее раствор фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм в хроматографическую виалу.

Инжектируют в хроматограф по 0,1 см<sup>3</sup> каждого из градуировочных растворов.

По полученным данным методом абсолютной градуировки строят градуировочную характеристику, выражающую зависимость площади пика (приборные единицы) от содержания метопролола тартрата в хроматографируемом объеме градуировочных растворов (мкг).

#### *9.4. Условия хроматографирования градуировочных растворов и растворов анализируемых проб*

Длина волны детектора	280 нм
Объем вводимой пробы	0,1 см <sup>3</sup>
Температура колонки	40 °С
Расход подвижной фазы	1,0 см <sup>3</sup> /мин
Время удерживания метопролола тартрата (4,0 ± 2,5 %) мин	

#### *9.5. Контроль стабильности градуировочной характеристики*

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят не реже 1 раза в три месяца, а также при смене реактивов или изменении условий анализа.

Один раз в год градуировочную характеристику устанавливают заново.

Для контроля стабильности используют вновь приготовленные градуировочные растворы с массовой концентрацией исследуемого вещества по п. 9.3 (в начале, середине и в конце измерений) и анализируют в точном соответствии с методикой.

Градуировочную характеристику считают стабильной, если для каждого контрольного образца выполняется условие:

$$\frac{|S_{изм} - S_{сп}|}{S_{сп}} \cdot 100 \leq K_{сп}, \text{ где} \quad (1)$$

$S_{изм}$ ,  $S_{сп}$  – значение площади пика (приборные единицы) метопролола тартрата в образце для контроля, измеренное и найденное по градуировочной характеристике соответственно;

$K_{сп}$  – норматив контроля,  $K_{сп} = 0,5 \cdot \delta$ , где

$\pm \delta$  – границы относительной погрешности, % (табл. 1).

Если условие стабильности не выполняется только для одного образца, то выполняют повторное измерение этого образца с целью исключения результата, содержащего грубую ошибку.

Если градуировочная характеристика не стабильна, выясняют причины нестабильности и повторяют контроль стабильности с использованием других образцов для градуировочной характеристики, предусмотренной методикой. При повторном обнаружении нестабильности градуировочной характеристики прибор градуируют заново.

### 9.6. Отбор проб воздуха

Отбор проб проводят с учетом требований ГОСТа 12.1.005—88 с изменением № 1 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и Р 2.2.2006—05 (прилож. 9) «Общие методические требования к организации и проведению контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны», раздел 2 «Контроль соответствия максимальным ПДК».

Одновременно отбирают две параллельные пробы.

Воздух с объемным расходом 5 дм<sup>3</sup>/мин аспирируют через фильтр, помещенный в фильтродержатель, снабженный металлической сеткой. Для определения массовой концентрации метопролола тартрата на уровне 0,15 мг/м<sup>3</sup> (½ ОБУВ) отбирают не менее 67 дм<sup>3</sup> воздуха в течение 13,4 минут.

Отобранные пробы можно хранить в бюксах в течение суток в холодильнике.

## 10. Выполнение измерений

Фильтр с отобранной пробой помещают в бюкс, пипеткой вместимостью 5 см<sup>3</sup> приливают 5,0 см<sup>3</sup> смеси ацетонитрила и воды особо чистой в соотношении 1 : 4 (по объему) и оставляют на 15 минут, периодически помешивая стеклянной палочкой для лучшего растворения вещества. Затем фильтр тщательно отжимают, раствор сливают в мерную пробирку вместимостью 10 см<sup>3</sup>. Фильтр повторно обрабатывают 5,0 см<sup>3</sup>

смеси ацетонитрила и воды особо чистой в соотношении 1 : 4 (по объему) и оставляют на 15 минут, периодически помешивая стеклянной палочкой, фильтр снова тщательно отжимают и удаляют. Раствор сливают в ту же пробирку, объем раствора доводят до метки смесью ацетонитрила и воды особо чистой в соотношении 1 : 4 (по объему). Далее раствор фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм в хроматографическую вials.

Инжектируют в хроматограф по 0,1 см<sup>3</sup> раствора анализируемой пробы.

Хроматографический анализ растворов пробы выполняют в тех же условиях, что и хроматографирование градуировочных растворов.

Регистрируют не менее двух хроматограмм для каждого раствора анализируемой пробы, соблюдая все условия, требуемые для градуировки хроматографической системы.

Количественное определение содержания метопролола тартрата (в мкг) в хроматографируемом объеме раствора анализируемой пробы проводят по предварительно построенной градуировочной характеристике.

**Примечание.** Фильтрация растворов анализируемых проб проводится для удаления нерастворимых в смеси ацетонитрила и воды особо чистой в соотношении 1 : 4 (по объему) вспомогательных веществ, входящих в состав лекарственных форм, содержащих метопролола тартрат.

## 11. Вычисление результатов измерений

Массовую концентрацию метопролола тартрата в воздухе рабочей зоны  $C$ , мг/м<sup>3</sup>, вычисляют по формуле:

$$C = \frac{a \cdot B}{b \cdot V_{20}}, \text{ где} \quad (2)$$

$a$  – содержание вещества в хроматографируемом объеме раствора анализируемой пробы, найденное по градуировочной характеристике, мкг;

$B$  – общий объем раствора анализируемой пробы, см<sup>3</sup>;

$b$  – хроматографируемый объем раствора анализируемой пробы, см<sup>3</sup>;

$V_{20}$  – объем воздуха, отобранный для анализа (дм<sup>3</sup>) и приведенный к стандартным условиям (прилож. 1).

За результат измерений принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, если выполняется условие приемлемости:



$$\frac{2 \cdot |C_1 - C_2|}{C_1 + C_2} \cdot 100 \leq r, \text{ где} \quad (3)$$

$C_1, C_2$  – результаты параллельных определений массовой концентрации метопролола тартрата в воздухе рабочей зоны, мг/м<sup>3</sup>;

$r$  – значение предела повторяемости, % (табл. 1).

Если условие не выполняется, выясняют причины превышения предела повторяемости, устраняют их и повторяют выполнение измерений в соответствии с требованиями методики измерений.

## 12. Оформление результатов анализа

Результат количественного химического анализа представляют в виде:

$$\bar{C} \pm 0,01 \cdot \delta \cdot \bar{C}, \text{ при } P = 0,95, \text{ где}$$

$\bar{C}$  – среднее арифметическое значение результатов  $n$  определений, признанных приемлемыми, мг/м<sup>3</sup>;

$\pm \delta$  – границы относительной погрешности измерений, % (табл. 1).

Если полученный результат измерений ниже нижней (выше верхней) границы диапазона измерений, то производят следующую запись в журнале: «массовая концентрация метопролола тартрата менее 0,15 мг/м<sup>3</sup> (более 1,5 мг/м<sup>3</sup>)».

## 13. Контроль результатов измерений

### 13.1. Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости

Проверку приемлемости результатов измерений в условиях воспроизводимости проводят:

а) при возникновении спорных ситуаций между двумя лабораториями;

б) при проверке совместимости результатов измерений, полученных при сличительных испытаниях (при проведении аккредитации лабораторий и инспекционного контроля).

Для проведения проверки приемлемости результатов измерений в условиях воспроизводимости каждая лаборатория использует пробы, оставленные на хранение.

Приемлемость результатов измерений, полученных в двух лабораториях, оценивают сравнением разности этих результатов с критической разностью  $CD_{0,95}$  по формуле:

$$\frac{2 \cdot |C_{cp1} - C_{cp2}|}{C_{cp1} + C_{cp2}} \cdot 100 \leq CD_{0,95}, \text{ где} \quad (4)$$

$C_{cp1}$ ,  $C_{cp2}$  – средние значения массовой концентрации метопролола тартрата, полученные в первой и второй лабораториях, мг/м<sup>3</sup>;

$CD_{0,95}$  – значение критической разности, % (табл. 1).

Если критическая разность не превышена, то приемлемы оба результата измерений, проводимых двумя лабораториями, и в качестве окончательного результата используют их среднеарифметическое значение. Если критическая разность превышена, то выполняют процедуры, изложенные в ГОСТ Р ИСО 5725-6—02 (п. 5.3.3).

При разногласиях руководствуются ГОСТ Р ИСО 5725-6—02 (п. 5.3.4).

### ***13.2. Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории***

Контроль качества результатов измерений в лаборатории при реализации методики осуществляют по ГОСТ Р ИСО 5725-6—02, используя контроль стабильности среднеквадратического (стандартного) отклонения повторяемости по п. 6.2.2 ГОСТ Р ИСО 5725-6—02 и показателя правильности по п. 6.2.4 ГОСТ Р ИСО 5725-6—02.

Рекомендуется устанавливать контролируемый период так, чтобы количество результатов контрольных измерений было от 20 до 30.

При неудовлетворительных результатах контроля, например, при превышении предела действия или регулярном превышении предела предупреждения, выясняют причины этих отклонений, в том числе проводят смену реактивов, проверяют работу оператора.

Разработаны сотрудниками ООО «Алгاما» (Сергеюк Н. П.) и АО «ВНЦ БАВ» (Голубева М. И., Крымова Л. И.).

**Приведение объема воздуха к стандартным условиям**

Приведение объема воздуха к стандартным условиям при температуре 293К (20 °С) и атмосферном давлении 101,33 кПа (760 мм рт. ст.):

$$V_{20} = \frac{V_t \cdot 293 \cdot P}{(273 + t) \cdot 101,33}, \text{ где}$$

$V_t$  – объем воздуха, отобранный для анализа,  $\text{дм}^3$ ;

$P$  – барометрическое давление, кПа (101,33 кПа = 760 мм рт. ст.);

$t$  – температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчета  $V_{20}$  следует пользоваться таблицей коэффициентов (прилож. 2). Для приведения воздуха к стандартным условиям надо умножить  $V_t$  на соответствующий коэффициент.

**Коэффициенты для приведения объема воздуха  
к стандартным условиям**

t°C	Давление P, кПа/мм рт. ст.									
	97,33/ 730	97,86/ 734	98,4/ 738	98,93/ 742	99,46/ 746	100/ 750	100,53/ 754	101,06/ 758	101,33/ 760	101,86/ 764
-30	1,1582	1,1646	1,1709	1,1772	1,1836	1,1899	1,1963	1,2026	1,2058	1,2122
-26	1,1393	1,1456	1,1519	1,1581	1,1644	1,1705	1,1768	1,1831	1,1862	1,1925
-22	1,1212	1,1274	1,1336	1,1396	1,1458	1,1519	1,1581	1,1643	1,1673	1,1735
-18	1,1036	1,1097	1,1158	1,1218	1,1278	1,1338	1,1399	1,1460	1,1490	1,1551
-14	1,0866	1,0926	1,0986	1,1045	1,1105	1,1164	1,1224	1,1284	1,1313	1,1373
-10	1,0701	1,0760	1,0819	1,0877	1,0936	1,0994	1,1053	1,1112	1,1141	1,1200
-6	1,0540	1,0599	1,0657	1,0714	1,0772	1,0829	1,0887	1,0945	1,0974	1,1032
-2	1,0385	1,0442	1,0499	1,0556	1,0613	1,0669	1,0726	1,0784	1,0812	1,0869
0	1,0309	1,0366	1,0423	1,0477	1,0535	1,0591	1,0648	1,0705	1,0733	1,0789
+ 2	1,0234	1,0291	1,0347	1,0402	1,0459	1,0514	1,0571	1,0627	1,0655	1,0712
+ 6	1,0087	1,0143	1,0198	1,0253	1,0309	1,0363	1,0419	1,0475	1,0502	1,0557
+10	0,9944	0,9999	0,0054	1,0108	1,0162	1,0216	1,0272	1,0326	1,0353	1,0407
+14	0,9806	0,9860	0,9914	0,9967	1,0027	1,0074	1,0128	1,0183	1,0209	1,0263
+18	0,9671	0,9725	0,9778	0,9830	0,9884	0,9936	0,9989	1,0043	1,0069	1,0122
+20	0,9605	0,9658	0,9711	0,9783	0,9816	0,9868	0,9921	0,9974	1,0000	1,0053
+22	0,9539	0,9592	0,9645	0,9696	0,9749	0,9800	0,9853	0,9906	0,9932	0,9985
+24	0,9475	0,9527	0,9579	0,9631	0,9683	0,9735	0,9787	0,9839	0,9865	0,9917
+26	0,9412	0,9464	0,9516	0,9566	0,9618	0,9669	0,9721	0,9773	0,9799	0,9851
+28	0,9349	0,9401	0,9453	0,9503	0,9555	0,9605	0,9657	0,9708	0,9734	0,9785
+30	0,9288	0,9339	0,9391	0,9440	0,9432	0,9542	0,9594	0,9645	0,9670	0,9723
+34	0,9167	0,9218	0,9268	0,9318	0,9368	0,9418	0,9468	0,9519	0,9544	0,9595
+38	0,9049	0,9099	0,9149	0,9199	0,9248	0,9297	0,9347	0,9397	0,9421	0,9471

**Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ**

1. Анастрозол	119
2. Бусерелина ацетат	38
3. Ионозин пранобекс	72
4. Кандесартан	130
5. Кандесартана цилексетил	130
6. Кветиапина фумарат	50
7. Метопролола тартрат	107
8. Натрий лаурилсульфат	82
9. Натрий лимоннокислый трехзамещенный дигидрат	28
10. Тикагрелор	60
11. Транексамовая кислота	6
12. Тринатрия цитрат дигидрат	28
13. Формотерола фумарат дигидрат	16
14. Эзомепразол магния тригидрат	94